



Urolase MAX


Plataforma láser
todo en uno
para urología






Tissue Sensor

Sistema de reconocimiento de tejido diseñado para maximizar la seguridad durante la litotricia: detiene automáticamente la emisión del láser al detectar tejido blando, evitando lesiones de la mucosa.

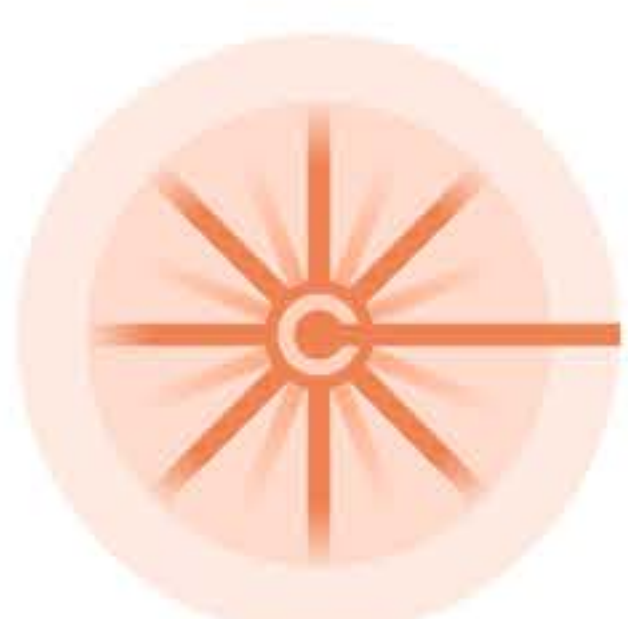

Láser de fibra de tulio de última generación

El sistema de láser de fibra de tulio más potente para urología, compatible con todo el espectro de procedimientos hospitalarios, desde cirugía de tejidos blandos hasta litotricia.

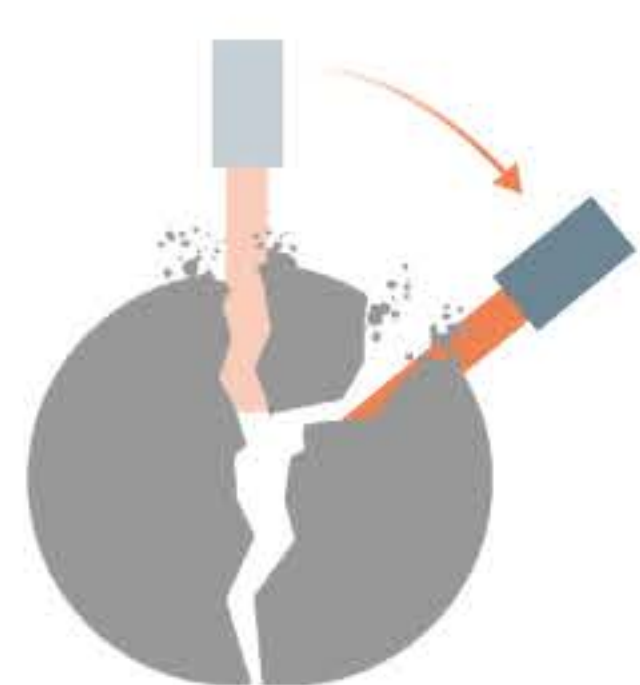

Litotricia

Modo MRP: minimiza la retropulsión del cálculo

Modo FinePulse: microfragmentación ultrarrápida para pulverización (“dusting”)

Modo UltraPulse: fragmentación inmediata en fragmentos grandes para facilitar la extracción



Cirugía de tejidos blandos

Modo DissectPulse: disección termomecánica para una enucleación precisa

Modo BloodlessPulse: coagulación eficiente con sangrado mínimo

Modo CleanPulse: vapoenucleación sin carbonización para una visibilidad óptima





Conector OnePush

El conector de fibra OnePush, con obturador automático, está diseñado para prevenir la contaminación y permitir conexiones rápidas, seguras y sencillas.




Fibra quirúrgica VPG OnePush


Desechable (uso único)

Reutilizable (uso múltiple)


Diámetros disponibles, μm

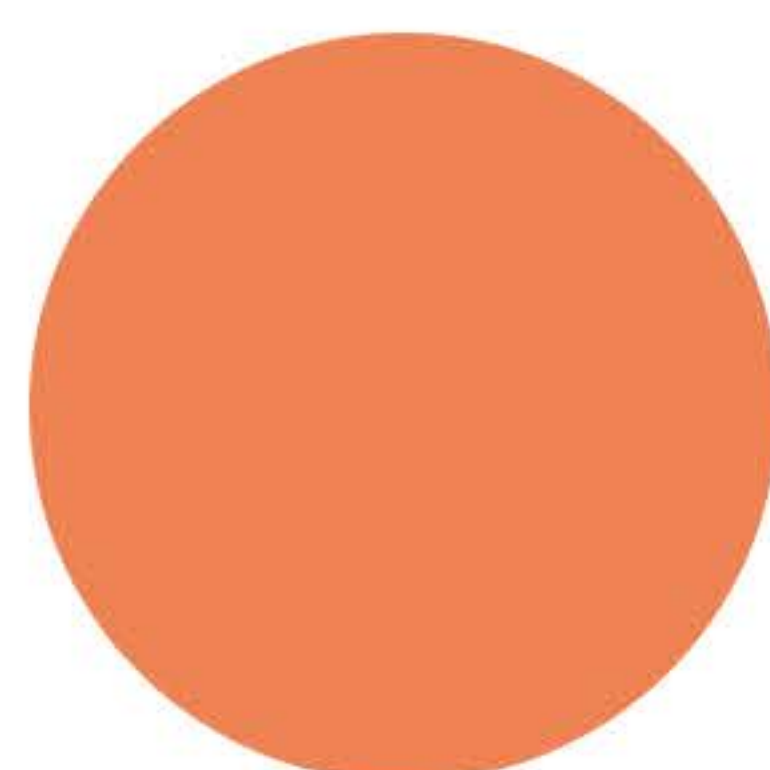


940 μm

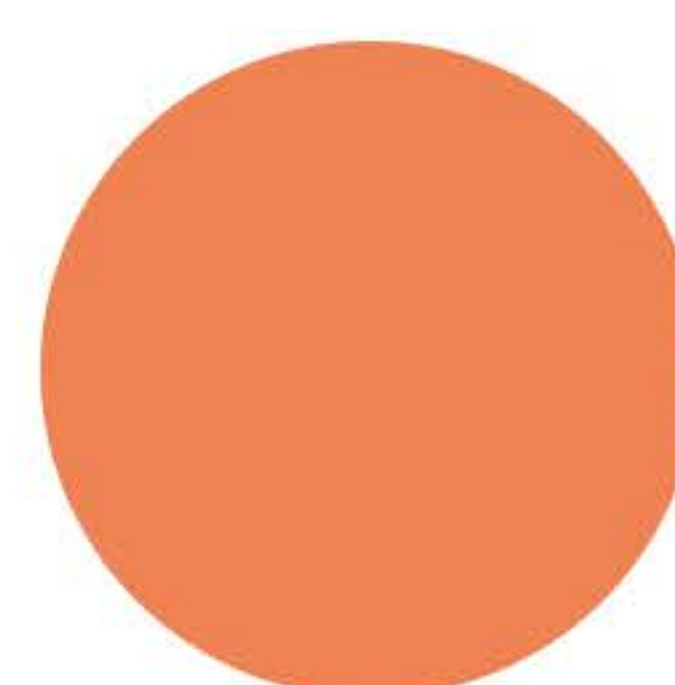

550 μm

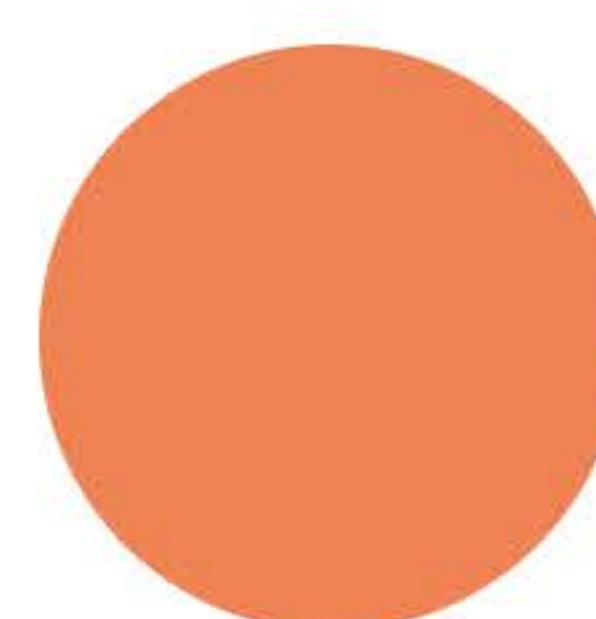

365 μm

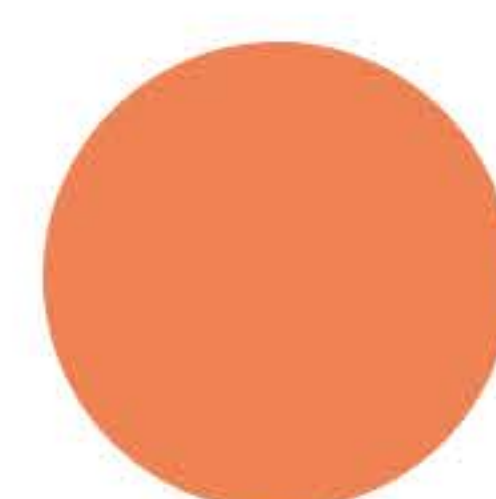

200 μm



150 μm



▮▮ Pulsos modulados

Los ajustes de pulso modulado y las características de alta potencia del sistema láser Urolase MAX elevan la litotricia a un nivel de eficiencia clínica fundamentalmente nuevo, superando a los sistemas láser urológicos convencionales.



10 mm



Nuevo modo FinePulse

Permite realizar litotricia a alta velocidad, pulverizando eficazmente los cálculos urinarios hasta obtener polvo ultrafino.



10 mm



Modo especializado UltraPulse

Proporciona energía de alto impacto, fragmentando de forma inmediata incluso los cálculos densos en fragmentos grandes para una extracción eficiente.


Modo MRP* – minimiza la retropulsión del cálculo durante la litotricia en comparación con láseres de holmio y modos de pulso estándar de la serie de láseres de fibra de tulio Urolase.

Pulso 120 H
Pulso largo*

Pulso 120 H
Pulso Moses


Urolase SP+
Pulso optimizado

Urolase MAX

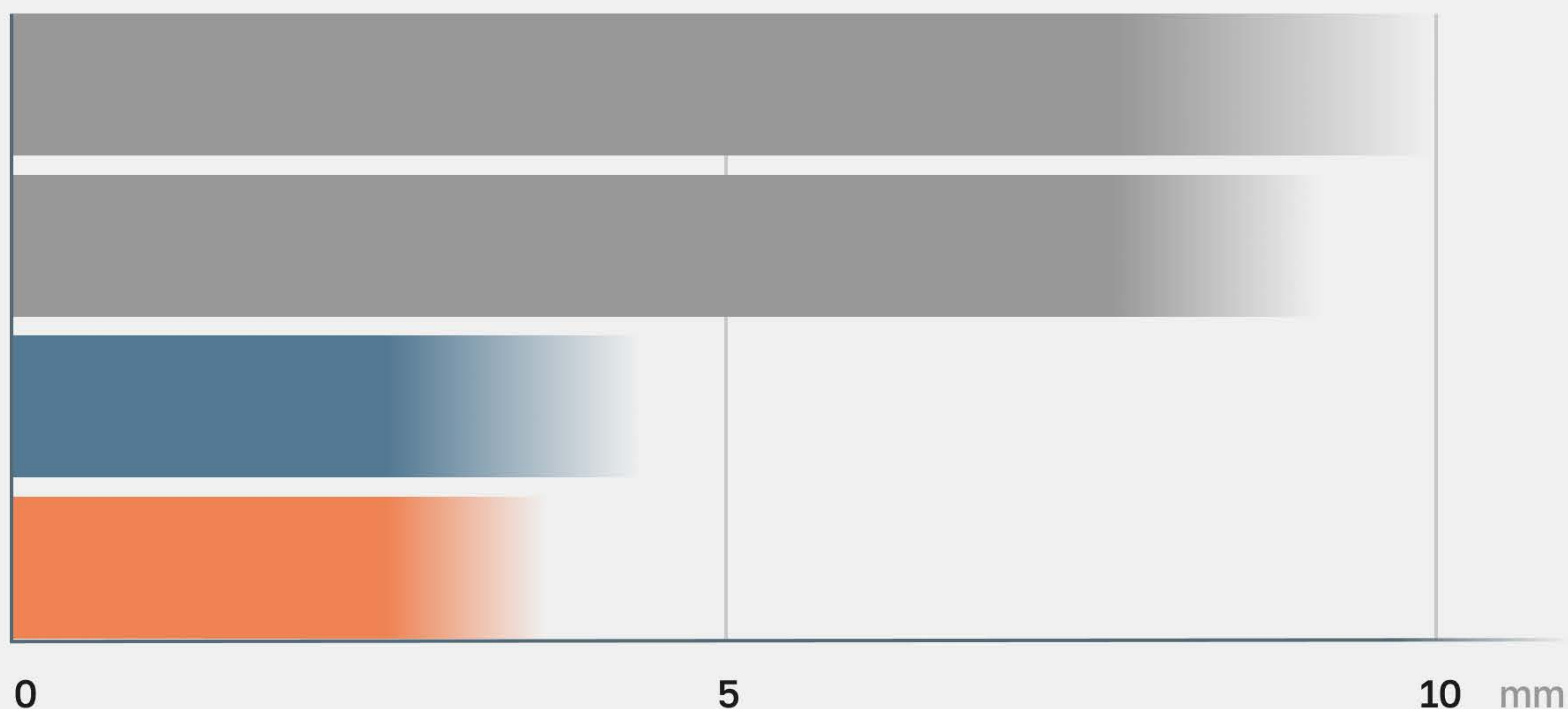

Tissue Sensor – reconocimiento de cálculo vs tejido

Tissue Sensor es una tecnología de seguridad innovadora desarrollada por VPG LaserOne. Detecta automáticamente tejido blando durante la litotricia y detiene instantáneamente la emisión del láser, minimizando el riesgo de daño no intencional.

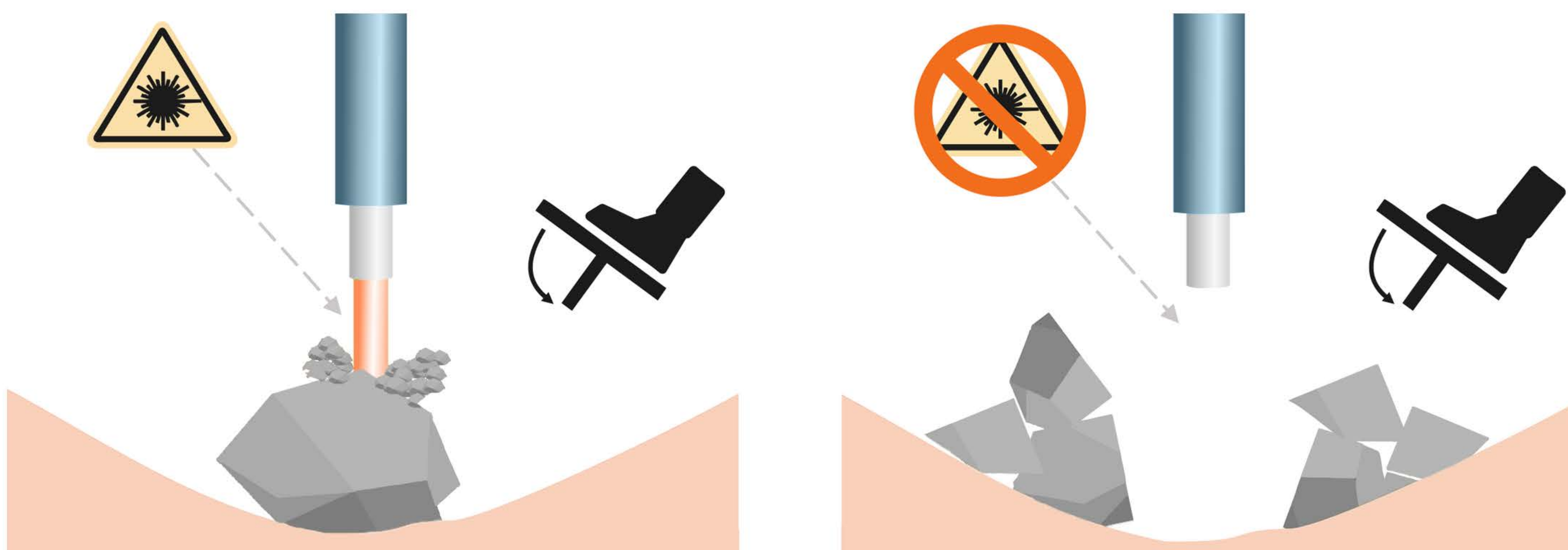

El sistema opera bajo el principio de diferenciación tisular en tiempo real. Detecta si frente a la punta de la fibra quirúrgica hay tejido duro (cálculo) o blando. Durante la litotricia, detiene automáticamente la emisión láser al detectar tejido blando, reduciendo significativamente el riesgo de lesión o perforación.

* Ventimiglia E., et al. (2020) Effect on Temporal Pulse Shape on Urinary Stone Phantom Retropulsion Rate and Ablation Efficiency Using Holmium: YAG and Superpulse Thulium Fiber Lasers. BJU Int. 2020 Jul; 126(1): 159-167




Tejidos blandos



Dos modos de enucleación en un solo sistema

Con dos modos de enucleación integrados, Urolase MAX ofrece mayor versatilidad para cirugías urológicas personalizadas y de alta precisión.

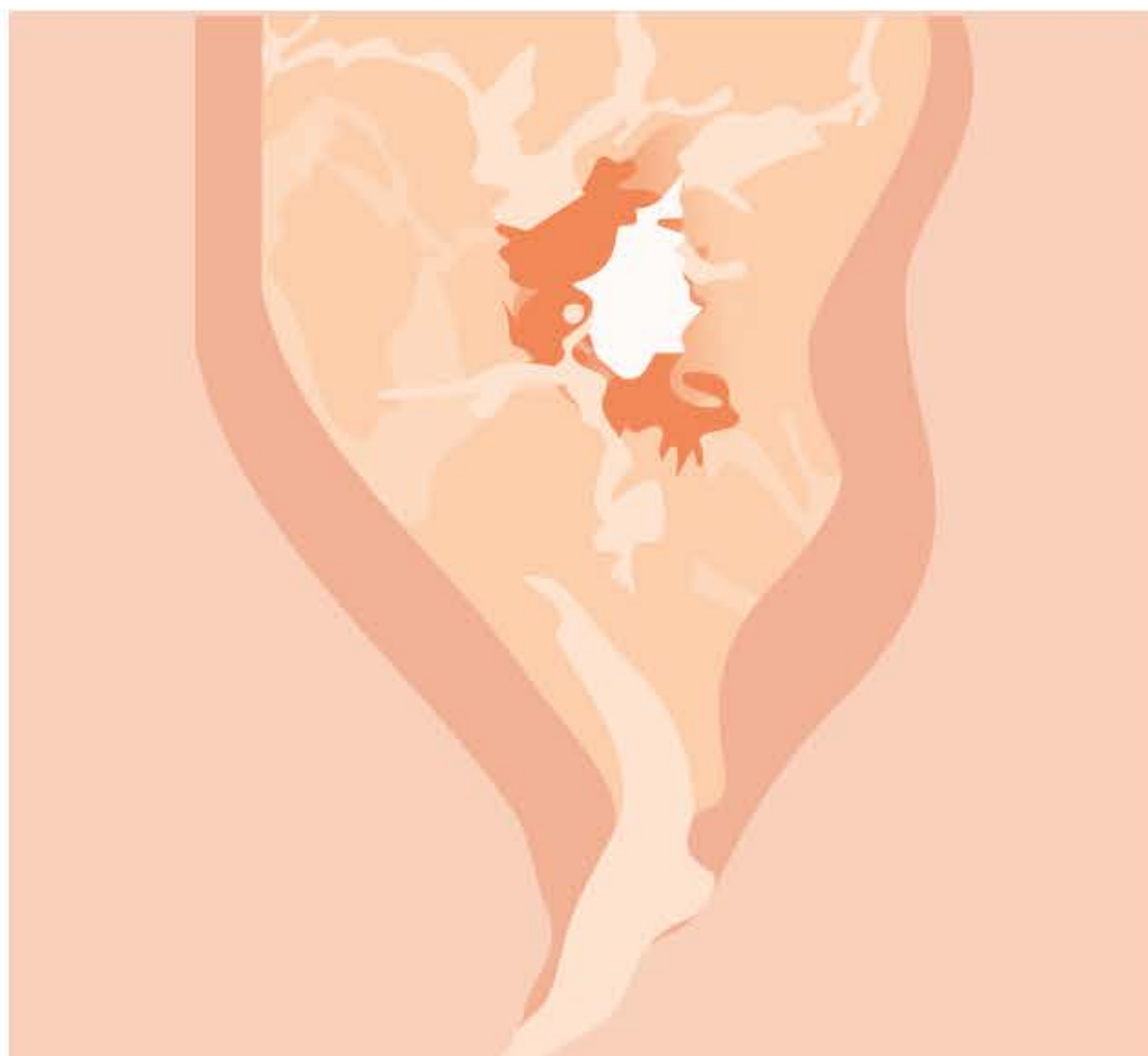


1 mm



Modo DissectPulse – enucleación modulada

- Proporciona hemostasia superior, superando significativamente a HoLEP
- Permite disección precisa del tejido adenomatoso, similar a HoLEP
- Sin carbonización

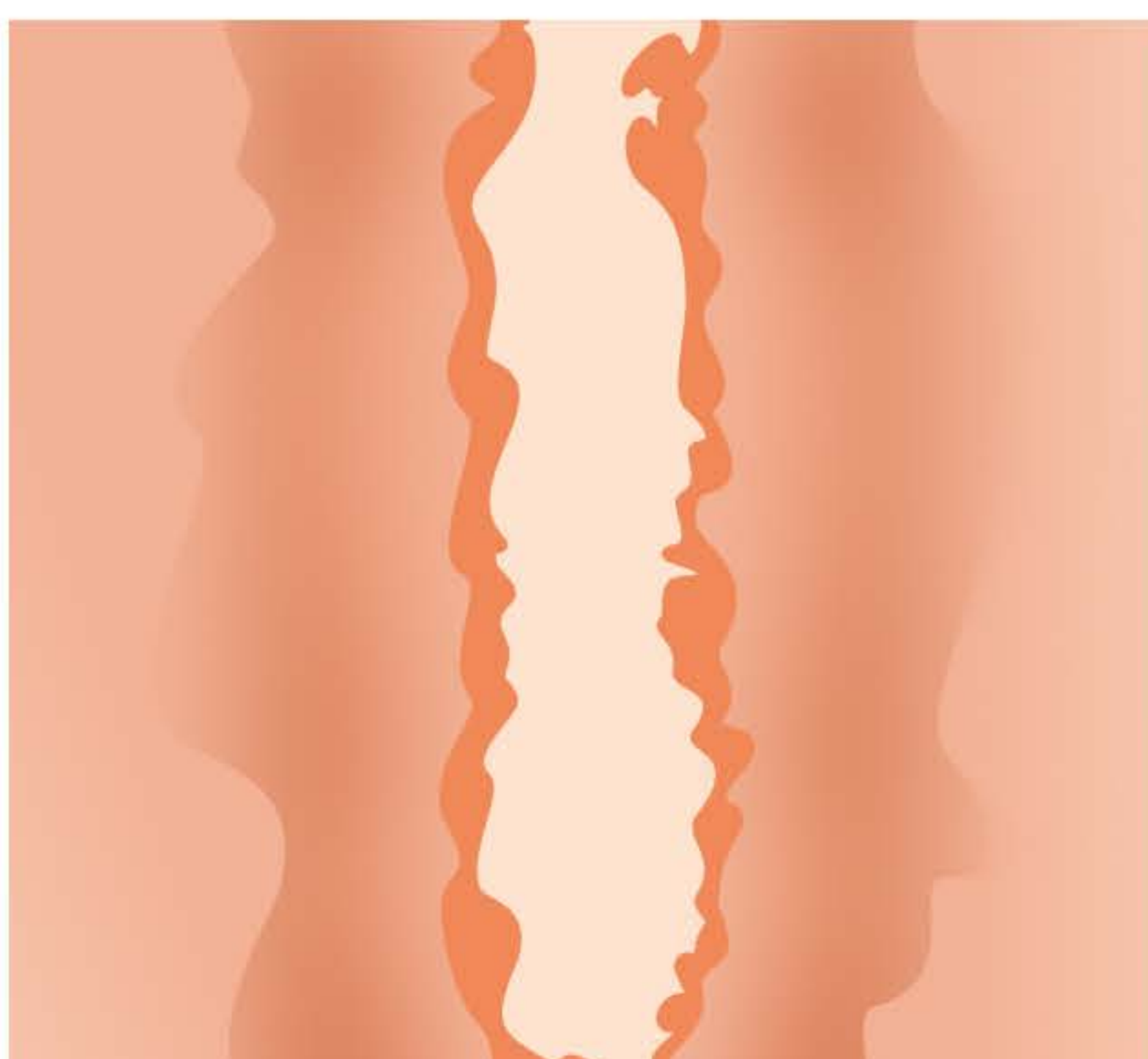

1 mm



ThuFLEP – enucleación clásica con láser de fibra de tulio


- Alta precisión gracias a la mínima profundidad de penetración
- Excelente hemostasia con prácticamente ausencia de pérdida sanguínea
- Vaporización eficiente de tejido blando



Surgeon's Assistant

Urolase MAX es el primer sistema láser con un asistente quirúrgico inteligente, desarrollado a partir de años de análisis de protocolos quirúrgicos por expertos líderes a nivel mundial. Ajusta automáticamente los parámetros del láser en tiempo real para garantizar seguridad, precisión y un rendimiento óptimo en diversos procedimientos.



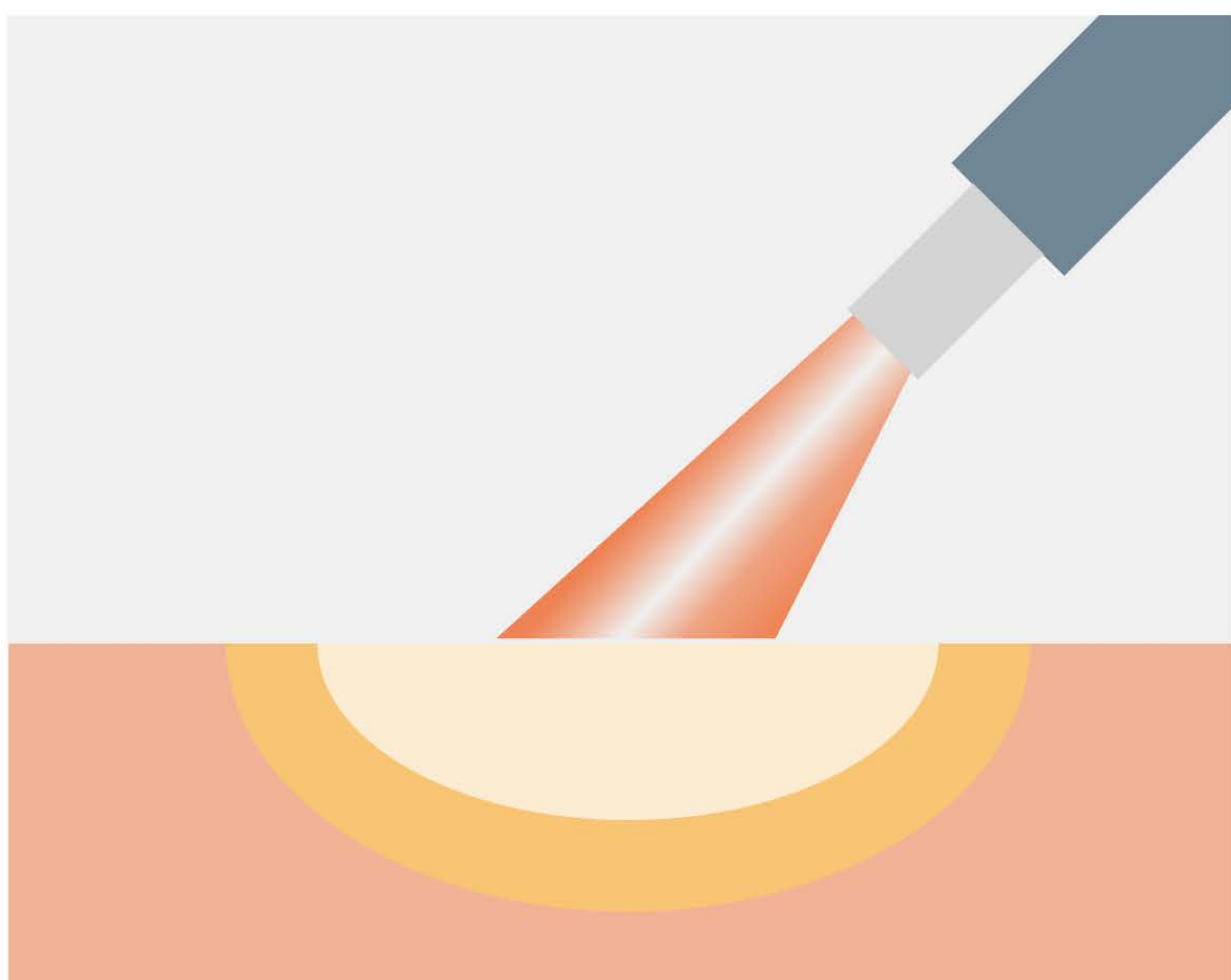

Modo de coagulación BloodlessPulse

Urolase MAX incorpora un modo de coagulación de zona amplia que garantiza hemostasia eficaz desde corta distancia, permitiendo tratamientos seguros incluso en zonas de difícil acceso.



Modo CleanPulse sin carbonización

Durante la vapoenucleación y vaporización, **CleanPulse** permite la eliminación de tejido blando sin carbonización y con daño térmico mínimo, ofreciendo una eficiencia comparable a los láseres de onda continua y preservando la visibilidad.

Ventajas del sistema



Hasta 3 veces más compacto y liviano que sistemas Ho:YAG



Instalación sencilla con conexión eléctrica estándar



Refrigeración por aire, no requiere unidad externa



Sin mantenimiento rutinario

Tecnología láser de precisión pionera

VPG LaserOne LLC (anteriormente IPG IRE-Polus Ltd.) es una empresa verticalmente integrada fundada por el destacado científico soviético Valentin Pavlovich Gapontsev, fundador de la corporación científica y tecnológica internacional IPG Photonics.

VPG LaserOne es un líder reconocido a nivel mundial en láseres y amplificadores de fibra, así como en dispositivos y sistemas basados en ellos. Con décadas de experiencia y profundo conocimiento técnico, diseña y suministra dispositivos láser médicos y fibras quirúrgicas para una amplia gama de aplicaciones.

VPG LaserOne desarrolla dispositivos médicos láser avanzados mediante un proceso de ciclo completo que incluye ingeniería de dispositivos, desarrollo de protocolos clínicos, investigación in vitro en laboratorio y ensayos clínicos realizados junto con centros clínicos líderes.



1991

Año de fundación



>1M

Pacientes tratados anualmente



50+

Patentes en tecnologías láser médicas



>3000

Sistemas láser médicos instalados en el mundo desde 2017